

MANUALE D'USO



**2 in 1 - ELETTROTERAPIA AD ALTA
FREQUENZA + GALVANICA VISO**

(cod. B-671-IT / 124226 / IDEBEAUTY-671)

 **ITALIANO**

2 IN 1. STRUMENTO DI BELLEZZA

Stimati clienti,

Grazie per aver scelto il nostro prodotto! Si prega di leggere questo manuale prima dell'uso in modo da garantire il massimo delle prestazioni e la sicurezza d'uso. Per favore, conservarlo per riferimento futuro

FUNZIONE

✳ Alta frequenza

1. Uso di raggi ultravioletti per sterilizzare la pelle e accelerare la guarigione delle ferite.
2. Sbarazzarsi di macchie, pigmentazione, brufoli e acne.

✳ Galvanico

1. Liberare la pelle da sporco, impurità e grasso dei pori della pelle.
2. Nutrire la pelle e migliorare le condizioni della pelle.


SPECIFICAZIONI

1. Operazione facile e veloce grazie alla tecnologia avanzata del microcomputer
2. Trattamento intelligente e affidabile che prevede 10 livelli regolabili.
3. Diversi metodi di applicazione disponibili

PANNELLO DESCRIZIONE OPERAZIONI

1. Ridurre il tempo
2. Diminuire l'energia
3. ACCESO/SPENTO
4. Aumentare il tempo
5. Aumentare l'energia

6. Galvanica +/- Modalità
7. Visualizzazione del tempo
8. Selezione funzione

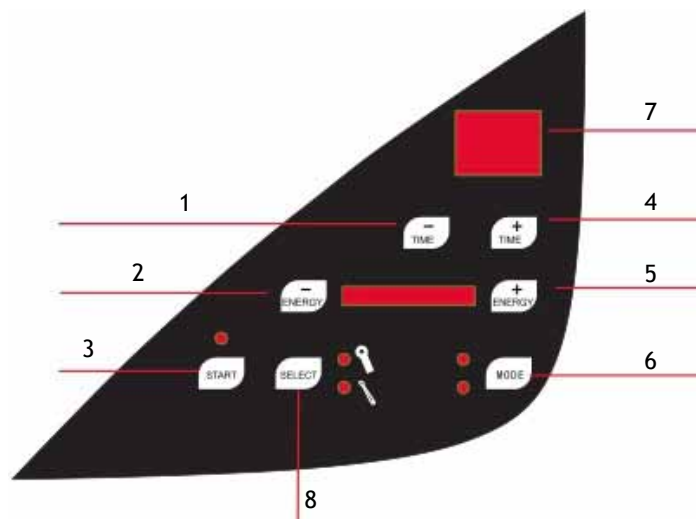

OPERAZIONE

✳ Alta frequenza

1. Testare prima il funzionamento su una piccola parte.
2. L'energia non deve essere troppo elevata per evitare eventuali lesioni, né troppo bassa per indebolire l'esito del trattamento.
3. Se è necessario rimuovere le macchie, muovere l'elettrodo sulla zona e si può vedere la melanina diminuire. Le macchie lievi possono essere rimosse con un solo trattamento, quelle più grandi necessitano 2-3 trattamenti.

✳ Galvanico

1. Mettere la barra di metallo negativo nelle mani del cliente.
2. Immergere un piccolo batuffolo di cotone nel tonico. Poi metterlo nel manipolo e applicare sulla pelle del cliente.
3. Posizionare l'elettrodo sulla fronte del cliente
4. Premere il tasto 6 per scegliere "+" per portare a out / "-" per portare a 5. Aumentare / diminuire

la energia in 10 livelli premendo lentamente il pulsante 5/2, il tempo di trattamento è di circa 4 ~ 6 minuti.

5. Al termine del trattamento, spegnere l'alimentazione e rimuovere la testina galvanica

✳ Operazione

1. Attaccare la spina, il tempo appare in 7 come 30 (minuti) e lampeggia nel secondo punto.
2. Premere per selezionare la funzione alta frequenza / galvanica.
3. Premere 1/4 per regolare il tempo di lavoro.
4. Premere 5/2 per regolare l'energia.
5. Tasto 6 per scegliere "+" -out / "-" solamente per condurre.

RACCOMANDAZIONI

1. Prima di indossare i guanti, il tecnico deve pulirsi le mani con l'alcol.
2. Gli elettrodi devono essere sterilizzati e mantenuti puliti e asciutti
3. Disinfettare la zona da trattare con alcol prima del trattamento
4. Applicare anestetico sulla zona 3 minuti prima di iniziare il trattamento
5. Durante il trattamento, non sostare troppo tempo nella zona trattata per evitare cicatrici
6. Rimuovere tutti gli oggetti metallici (orecchini, collane, ecc) prima dell'operazione.

PRECAUZIONI

1. Per spostare lo strumento, bisogna alzarlo e abbassarlo con cautela; in caso di guasto, si prega di non sbatterlo al fine di evitare malfunzionamenti causati dall'impatto.
2. Il dispositivo deve essere mantenuto in una posizione orizzontale per evitare urti e vibrazioni.

3. Non premere lo strumento o posizionare oggetti pesanti sullo strumento per evitare la deformazione dell'involucro, danni o malfunzionamenti.

4. È necessario selezionare la relativa fonte di alimentazione che lavora in accordo con le indicazioni sul corpo dello strumento.

5. Non è consentito usare questo strumento nella stanza da bagno.

6. Durante i temporali, scollegare e staccare l'alimentazione per evitare un incidente.

7. Impedire al liquido di entrare nell'unità, in quanto ciò potrebbe causare cortocircuiti e danneggiare il dispositivo

8. Se lo strumento non viene utilizzato per un lungo tempo, è necessario rimuovere la spina dalla presa.

PARAMETRI TECNICI

Tensione: C220V - 240V AC

Frequenza: 50Hz

Potenza massima della macchina: 25W

Potenza standard: 15W (in uso continuo)

Formato dell'imballaggio: 26.5 * 14 * 22.5 (L * H * W) cm

NORMATIVE

DECRETO LEGGE 15/10/2015 N°206 - Informativa 2B - 13B (per le attrezzature in uso estetico)

CEI EN 60601-1-2-3

EC COUNCIL DIRECTIVE 2014/30/EU EMC -

EC COUNCIL DIRECTIVE 2014/35/EU LVD

2011/65/EU ROHS