



doctor POINT
Soluzioni medicali a portata di click

cod. 1005767



(fabbricante: Simulaids)


DOCTORPOINT s. r. l.

Sede Legale: via Ugo Foscolo n.15 - 28021 Borgomanero (No)

P.I. / C.F. / Reg.Imp.Novara 02191520036 REA 221049 Cap. Soc. 10.000,00 € Int. Versato

Sede Operativa: via Garibaldi, 9 (angolo piazza San Giuliano) - 28024 Gozzano (No)

Tel. +39 0322 1951117 Fax. +39 0322 060188 Web: www.doctorpoint.it Email: info@doctorpoint.it

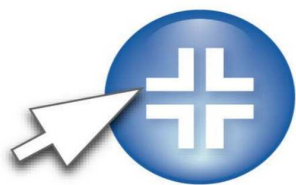

doctor POINT
Soluzioni medicali a portata di click

Manichini di salvataggio in acqua con funzione di rianimazione Adulti e adolescenti

Caratteristiche e costruzione

Il corpo del manichino di salvataggio per adulti è costituito da filo di acciaio rivestito, parti di collegamento e altre parti metalliche. Il manichino di salvataggio ha articolazioni mobili e può essere utilizzato in vari Vengono utilizzati esercizi di salvataggio in acqua, anche durante il recupero dalla superficie dell'acqua o dal fondo.

Adulto

- Peso del manichino di soccorso: circa 18,2 kg
- Peso del manichino di soccorso, che scende fino al mento: circa 48 kg
- Può anche essere appesantito fino a un peso di 64 kg per l'affondamento completo.
- Il filo e gli arti in acciaio sono intercambiabili (contattare il nostro servizio clienti).

Principali aree di applicazione:

• Recupero dalla superficie dell'acqua:

Il bagnino per adulti è destinato ai programmi di esercizio del bagnino.

Il manichino di salvataggio viene realizzato riempiendolo d'acqua attraverso i piccoli fori nelle gambe e nelle braccia lamentato. Il busto del manichino di soccorso può essere riempito d'acqua aprendo la valvola sulla spalla essere riempito. Una volta riempito, il manichino di salvataggio scende all'altezza del mento.

• Recupero dal fondo dell'acqua:

Per immergere completamente il manichino di soccorso adulto, rimuovere la copertura in plastica così come l'inserito di plastica nella pancia del manichino di soccorso. Metti circa 5 kg di peso extra (ad esempio un mattone). Reinserire l'inserito di plastica e fissare la copertura di plastica, ora quindi il manichino di salvataggio andrà completamente sotto la superficie d'acqua.

Importante: in situazioni in cui il manichino di salvataggio potrebbe andare perso, consigliamo vivamente che per attaccarli ad un galleggiante e/o ad una linea.

Magazzinaggio:

Svuotare il manichino di salvataggio per adulti dopo ogni utilizzo. Tieni con te il manichino di salvataggio Temperatura ambiente. Se il manichino di salvataggio viene conservato a basse temperature, diventerà più rigido. Esso riacquisterà la sua consueta elasticità quando il manichino viene riportato in un ambiente più caldo.

Smontaggio:

1. Allentare il rivestimento in corrispondenza dei bottoni automatici sulle spalle e tirarlo sotto i polmoni fuori uso. Non è necessario rimuovere completamente il rivestimento. Assicurati che il Polmoni esposti e non coperti da nessuna parte dalla copertura o dalla parete del tronco.
 2. Rimuovere la testa del manichino di soccorso utilizzando il perno di bloccaggio nel collo del manichino di soccorso deve tirare verso l'esterno nella parte posteriore.
 3. Rimuovere il boccaglio dal viso e disinfettarlo.
 4. Staccare le parti del sistema della valvola delle vie aeree l'una dall'altra utilizzando la valvola trasparente nella bocca.
- Afferrare il ritaglio con una mano e la valvola unidirezionale rossa all'interno della testa con l'altra. Le valvole possono essere separate più facilmente con un leggero movimento rotatorio.
5. Eliminare tutte queste parti relative alle vie aeree ad eccezione dei boccagli.


DOCTORPOINT s. r. l.

Sede Legale: via Ugo Foscolo n.15 - 28021 Borgomanero (No)

P.I. / C.F. / Reg.Imp.Novara 02191520036 REA 221049 Cap. Soc. 10.000,00 € Int. Versato

Sede Operativa: via Garibaldi, 9 (angolo piazza San Giuliano) - 28024 Gozzano (No)

Tel. +39 0322 1951117 Fax. +39 0322 060188 Web: www.doctorpoint.it Email: info@doctorpoint.it

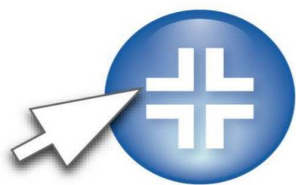

doctor POINT
Soluzioni medicali a portata di click

Assemblea:

1. Inserire la valvola rossa nella parte posteriore della sezione della bocca della testa in modo che si colleghi con l'individuo
Il connettore della valvola punta in avanti.
2. Posizionare la valvola di plastica trasparente nell'apertura della bocca sull'ugello sporgente di quello rosso Valvola. Premere con decisione sulla valvola trasparente per evitare che le parti scivolino.
3. Posizionare la trachea tra il perno di bloccaggio e la parte anteriore del collo. Lascia i polmoni sotto china la testa.
4. Riattaccare la testa al manichino di soccorso; Per fare ciò, tirare il perno di bloccaggio nella parte posteriore del collo
Esci dal manichino di salvataggio e fai scivolare la testa sul collo. L'attraverso il
L'asse che attraversa la parte della testa si ferma nella fessura nel collo della bambola. Lascia andare il perno di bloccaggio assicurando così la testa.
5. Iperestendere la testa all'indietro ed espandere i polmoni sul petto. Stai attento
Assicurarsi che le vie aeree non siano attorcigliate, poiché ciò le ostruirebbe.
6. Riposizionare la fodera sul petto e fissarla con i bottoni automatici.
7. Inserire un boccaglio disinfettato nella testa

DOCTORPOINT s. r. l.

Sede Legale: via Ugo Foscolo n.15 - 28021 Borgomanero (No)

P.I. / C.F. / Reg.Imp.Novara 02191520036 REA 221049 Cap. Soc. 10.000,00 € Int. Versato

Sede Operativa: via Garibaldi, 9 (angolo piazza San Giuliano) - 28024 Gozzano (No)

Tel. +39 0322 1951117 Fax. +39 0322 060188 Web: www.doctorpoint.it Email: info@doctorpoint.it